


Arbeitsplatzeinstellungen

Einstellungen für Dräger Prüfgeräte

Wurde an dem Arbeitsplatz, an dem die Drägerware.Werkstatt installiert wurde, ebenfalls die Software von Dräger Prüfgeräten (z. B. Quaestor, Prestor, Testor mit Adaptor) installiert, so kann die Ansteuerung dieser Prüfgeräte direkt aus der Drägerware.Werkstatt erfolgen.

Dazu befindet sich im Menü **Einstellung** ein neuer Menüpunkt **Arbeitsplatzeinstellung - Einstellungen für Dräger Prüfgeräte**.

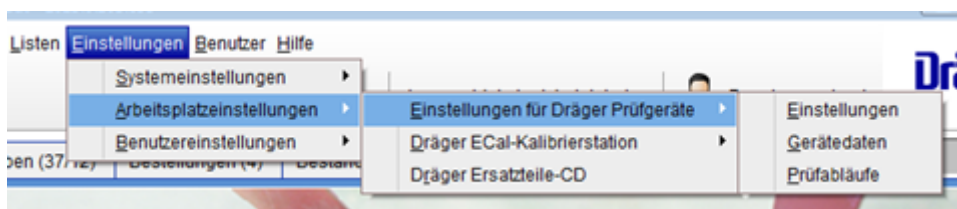

Hierüber können die verschiedenen Konfigurationsseiten der jeweiligen Prüfsoftware aufgerufen werden. Die Beschreibung hierzu befindet sich in den entsprechenden Handbüchern der Prüfgerätesoftware.

Prüfgeräteauswahl

Um für eine Prüfung das Prüfgerät aus der Drägerware.Werkstatt zu starten, muss im Fenster **Prüfung anlegen** das jeweilige Prüfgerät ausgewählt werden.

[Prüfung/Dienst anlegen](#)

Wurden in der MAT-Hierarchie die Werte für den Prüfablauf und Prüftyp noch nicht vordefiniert, müssen an jedem Arbeitsplatz diese Werte vor der Prüfung festgelegt werden. Hierzu öffnet sich ein neues Fenster, in dem die Zuordnungen vorgenommen werden können.

Da bei dieser Zuordnungsart die Einstellungen an jedem Arbeitsplatz durchgeführt werden müssen, empfiehlt es sich diese Werte in der MAT-Hierarchie vorzubelegen.

Gerätestruktur verwalten - MAT-Hierarchie

Bereits vorhandene Geräte beim Scannen ignorieren

Ist diese Option aktiviert, erfolgt beim wiederholten Scannen eines Barcodes keine Hinweismeldung mehr, dass dieses Gerät bereits vorhanden ist. Diese Funktion ist bei der Verwendung von Sammelbarcodelesern erforderlich.